



QUANTUMREHAB.ES



Quantum Rehab nació del deseo de ofrecer a los pacientes las sillas de ruedas eléctricas de rehabilitación y las tecnologías relacionadas inspiradas en los clientes más avanzadas posible.

Con un enfoque clínico e inspirados en los clientes, los productos de Quantum Rehab se han diseñado y fabricado para cumplir con la variedad más amplia de necesidades de rehabilitación específicas con diseñados funcionales, duraderos, estilizados y de alto rendimiento para mejorar la funcionalidad diaria y la calidad de vida. En Quantum, las necesidades de los clientes y sus deseos son la fuerza motora. Nos dedicamos no solo a satisfacer las necesidades médicas y clínicas, sino también las necesidades relacionadas con la calidad de vida. Desde el asiento eléctrico más avanzado para la gestión de presión hasta puertos USB, Bluetooth® e iluminación del parachoques: no ignoramos ninguna necesidad del consumidor.





### CONTENIDO

Tipos de productos	04
Opciones de conducción	05
Sparky	06
Aspen	07
Partner	30
Q4	06
Edge 3	10
Edge 3 Stretto	11
Q6 Edge HD	12
4Front 2	13
Q1450	14
Accesorios	15
Soluciones de asientos	16
Basculación anterior	17
Suspensión SRS	18
Control de tracción inteligente	18
Asistente interactivo	19
Drive	20
Soluciones para la cabeza	23
Cojines y respaldos	24
nternacional	26
Pride Mobility Products	27
Resumen de productos	28
Servicio y asistencia	29



#### TIPOS DE PRODUCTOS

Nuestros productos se pueden dividir en distintos grupos: pediátrico, rango medio y bariátrico. El grupo al que pertenece un producto se puede reconocer por los símbolos en la página del producto.

#### **PEDIÁTRICA**

Una solución compacta, rápida, ajustable y segura: nuestras sillas eléctricas pediátricas se desarrollan alrededor de las necesidades del usuario.

#### **QUANTUM**

Desde sillas eléctricas de nivel básico hasta soluciones de gama alta. Que aparezca el nombre de Quantum en un producto es la mejor garantía para una solución de movilidad resistente, funcional y cómoda.

#### **BARIÁTRICA**


Con motores de alto par y mayores capacidades de peso, las soluciones muy resistentes de Quantum se han perfeccionado para adaptarse a los requisitos del usuario.






#### **OPCIONES DE CONDUCCIÓN**

#### TRACCIÓN CENTRAL 6 RUEDAS

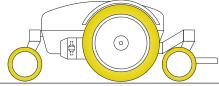


La exclusiva silla con tracción central 6 de Quantum ofrece un bajo impacto OMNI-Casters (ruedas giratorias de nailon) en la parte delantera y trasera para evitar enganches de las ruedas y proporciona la tracción definitiva manteniendo las seis ruedas en el suelo.

#### TRACCIÓN DELANTERA

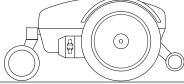

La tecnología de tracción delantera de Quantum ofrece cuatro ruedas en el suelo con ruedas motrices resistentes. La tracción delantera proporciona un rendimiento fluido en exteriores pero con la capacidad de conducir en interiores debido a su radio de giro corto. La tracción delantera también es beneficiosa para los usuarios que prefieren sentarse con un ángulo de rodilla de 90°.

#### TRACCIÓN TRASERA

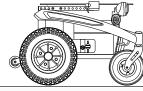

La tecnología de tracción trasera de Quantum ofrece cuatro ruedas en el suelo con ruedas giratorias frontales grandes y ruedas motrices resistentes. La tracción trasera permite un rendimiento fluido en exteriores y un control de tracción excelente. La tecnología de tracción trasera de Quantum ofrece cuatro ruedas en el suelo con ruedas giratorias frontales grandes y ruedas motrices resistentes. La tracción trasera permite un rendimiento fluido en exteriores y un control de tracción excelente.







Diseñada para ofrecer una capacidad de rehabilitación completa en un conjunto pediátrico compacto y potente. Diseñada para funcionar en espacios reducidos y seguir el ritmo de los niños activos de hoy en día. Entre las características estándar se encuentran la inclinación eléctrica del asiento y la reclinación manual accionada por la persona cuidadora.

#### **COLORES**



RUEDAS MOTRICES	Neumáticas 12"			
RUEDAS CASTER	Neumáticas 8"			
RUEDAS ANTIVUELCO	Macizas 3"			
VELOCIDAD MÁXIMA <sup>1</sup>	Hasta 10 km/h			
DISTANCIA DE LA BASE HASTA EL SUELO	l U5 mm			
RADIO DE GIRO <sup>2</sup>	743 mm			
LONGITUD TOTAL <sup>2,4</sup>	959 mm			
ANCHURA TOTAL <sup>2</sup>	610 mm			



# ASPEN

La silla eléctrica con tracción trasera **Aspen** presume de un chasis compacto, lo que la convierte en más manejable que otras sillas eléctricas con tracción trasera. La Aspen proporciona un rendimiento mejorado de escalada de obstáculos y un radio de giro más duro. Tiene un chasis disponible con diseño cilíndrico en nuevas opciones de colores y es compatible con asientos y electrónica de rehabilitación, lo que la convierte en una gran silla de ruedas económica.

#### **COLORES**



Silver Bullet

RUEDAS MOTRICES	Neumáticas o macizas 14"
RUEDAS CASTER	Macizas 9" o 8"
RUEDAS ANTIVUELCO	Macizas 3"
VELOCIDAD MÁXIMA¹	Hasta 10 km/h
DISTANCIA DE LA BASE HASTA EL SUELO	76 mm
RADIO DE GIRO <sup>2</sup>	430 mm
LONGITUD TOTAL <sup>2,4</sup>	850 mm
ANCHURA TOTAL <sup>2</sup>	580 mm







La silla eléctrica de tracción trasera R44 **Partner** de la gama Quantum ofrece un diseño vanguardista que proporciona un rendimiento notablemente mejorado de escalada de obstáculos y una conducción más fluida. Proporciona una manejabilidad excelente en espacios reducidos, una bandeja deslizante para la batería para un acceso sencillo y acepta asientos y electrónica de rehabilitación. La Partner es una silla eléctrica superior para los clientes más activos.

#### **COLORES**



RUEDAS MOTRICES	Neumáticas o macizas 14"				
RUEDAS CASTER	Neumáticas 10" o neumáticas o macizas 9"				
VELOCIDAD MÁXIMA¹	Hasta 10 km/h				
DISTANCIA DE LA BASE HASTA EL SUELO					
RADIO DE GIRO <sup>2</sup>	654 mm				
LONGITUD TOTAL <sup>2,4</sup>	1100 mm				
ANCHURA TOTAL <sup>2</sup>	635 mm				





La Quantum **Q4** es una silla de ruedas eléctrica compacta con tracción central diseñada para uso interior y exterior. Gracias a su radio de giro pequeño de 508 mm, es fácilmente manejable y puede adaptarse a cualquier entorno.

#### **COLORES**



RUEDAS MOTRICES	Neumáticas o macizas 14"
RUEDAS CASTER	Macizas 6"
VELOCIDAD MÁXIMA <sup>1</sup>	Hasta 8 km/h
DISTANCIA DE LA BASE HASTA EL SUELO	63 mm
RADIO DE GIRO <sup>2</sup>	508 mm
LONGITUD TOTAL <sup>2,4</sup>	902 mm
ANCHURA TOTAL <sup>2</sup>	610 mm



## EDGE 3









La Edge 3 proporciona una suspensión amortiguada propia del sector automovilístico, lo que ofrece una conducción fluida y cómoda y con una estabilidad avanzada con la tecnología SRS. Otras de las características que incluye es el iLevel opcional disponible a 7,2 km/h con hasta 305 mm de altura para ajustar el asiento de forma eléctrica. Entre las funciones estándar se incluyen la iluminación led del parachogues, un cargador USB y toques de color en la rueda motriz.

#### COLORES\*

\* Diríjase al sitio web para consultar la lista completa de colores disponibles.











Green Machine

Electric Blue

Red Corvette

Back in Black

White Satin

RUEDAS MOTRICES	Neumáticas o macizas 14"
RUEDAS CASTER	Macizas 6"
VELOCIDAD MÁXIMA <sup>1</sup>	Hasta 10 km/h
DISTANCIA DE LA BASE HASTA EL SUELO	63 mm
RADIO DE GIRO <sup>2</sup>	508 mm
LONGITUD TOTAL <sup>2,4</sup>	902 mm
ANCHURA TOTAL <sup>2</sup>	610 mm







# Stretta

La Edge 3 Stretto presenta un ancho reducido para una manejabilidad excelente y viene equipada con una suspensión SRS (Smooth Ride Suspension) independiente, lo que la hace perfecta para niños, adolescentes y adultos pequeños. La Stretto está disponible con ruedas motrices de 14" y de forma opcional con un ajuste eléctrico de la altura del asiento de iLevel de 305 mm.

#### COLORES\*

\* Diríjase al sitio web para consultar la lista completa de colores disponibles.















Lemon Raspberry Evolution Crush Beret Orange

Sugar Plum

Cherry Bomb

Blue Jean

**CARACTERÍSTICAS** 

RUEDAS MOTRICES	Neumáticas o macizas 14"
RUEDAS CASTER	Delanteras: macizas 5" Traseras: macizas 6"
VELOCIDAD MÁXIMA¹	Hasta 10 km/h
DISTANCIA DE LA BASE HASTA EL SUELO	73 mm
RADIO DE GIRO <sup>2</sup>	622 mm
LONGITUD TOTAL <sup>2,4</sup>	825 mm
ANCHURA TOTAL <sup>2</sup>	552 mm



# de eqdë









Con funciones como los motores estándar de 4 polos, un diseño de tracción central de 6 ruedas y una suspensión ATX, la **Q6 Edge HD** está diseñada para satisfacer las necesidades de rendimiento de los usuarios más activos. Disponible tanto con el sistema de asiento TRU-Balance 3 como con los sistemas de asiento Synergy.

#### COLORES\*

\* Diríjase al sitio web para consultar la lista completa de colores disponibles.











Green Machine

Electric Blue

Red Corvette

Back in Black

White Satin

RUEDAS MOTRICES	Neumáticas o macizas 14"
RUEDAS CASTER	Macizas 6"
VELOCIDAD MÁXIMA <sup>1</sup>	Hasta 7,6 km/h
DISTANCIA DE LA BASE HASTA EL SUELO	64 mm
RADIO DE GIRO <sup>2</sup>	502 mm
LONGITUD TOTAL <sup>2,4</sup>	904 mm
ANCHURA TOTAL <sup>2</sup>	667 mm



# 4FRONT.2

¡La 4FRONT 2 es la siguiente generación de la silla eléctrica 4Front! El nuevo control de tracción inteligente STC (Smart Traction Control), junto con la suspensión SRS (Smooth Ride Suspension) proporcionan estabilidad para unas transiciones suaves de obstáculos y una actuación de conducción inigualable. Entre las nuevas funciones adicionales se incluyen los motores de 4 polos y brazos giratorios rediseñados para una durabilidad y estética mejoradas y un peso reducido.

#### COLORES\*

\* Diríjase al sitio web para consultar la lista completa de colores disponibles.



Deep Purple



Green

Machine



Electric

Blue





Corvette



in Black



White

Satin

RUEDAS MOTRICES	Neumáticas o macizas 14"			
RUEDAS CASTER	Macizas 9"			
RUEDAS ANTIVUELCO	Macizas 4"			
VELOCIDAD MÁXIMA <sup>1</sup>	Hasta 10,6 km/h			
DISTANCIA DE LA BASE HASTA EL SUELO	1 /18 mm			
RADIO DE GIRO <sup>2</sup>	658 mm			
LONGITUD TOTAL <sup>2,4</sup>	1014 mm			
ANCHURA TOTAL <sup>2</sup>	616 mm			



# 1450





La base de alimentación bariátrica con tracción delantera de la **Quantum 1450** presenta un diseño innovador que proporciona un rendimiento excepcional en exteriores mientras aporta una manejabilidad en espacios reducidos excelente. La Q1450 acepta la colección completa de opciones de asiento y electrónica para rehabilitación.

#### **COLORES**



RUEDAS MOTRICES	Macizas 14"			
RUEDAS CASTER	Macizas 9"			
RUEDAS ANTIVUELCO	Macizas 4"			
VELOCIDAD MÁXIMA <sup>1</sup>	Hasta 7,9 km/h			
DISTANCIA DE LA BASE HASTA EL SUELO	38 mm			
RADIO DE GIRO <sup>2</sup>	673 mm			
LONGITUD TOTAL <sup>2,4</sup>	972 mm			
ANCHURA TOTAL <sup>2</sup>	743 mm			

## **ACCESORIOS**



Portamochilas



Gancho para objetos personales



Soporte para oxígeno



Protectores de ropa



Soporte para vasos



Espejo retrovisor



Guantera



Sistema de hidratación



Iluminación led del parachoques



Barras para transferencias



8" casters



Cargador USB para dispositivos móviles



Manillar de empuje



Soporte para el teléfono



Cámara retrovisora

Diríjase al sitio web o póngase en contacto con su distribuidor para más información acerca de la gama completa de accesorios.



#### **SOLUCIONES DE ASIENTOS**





Bariátrica



# BASCULACIÓN ANTERIOR



#### **DISPONIBLE EN**

- Edge 3
- Edge 3 Stretto
- 4Front 2



#### SMOOTH RIDE SUSPENSION

Con una comodidad y una calidad de manejo sin precedentes, la suspensión SRS proporciona un rendimiento en la conducción excepcional sobre distintos terrenos. Asimismo, añade estabilidad a la opción de ajuste eléctrico de la altura del asiento iLevel.

Cuando desea una conducción cómoda y fluida, con un rendimiento incomparable y una estabilidad avanzada, solo tiene una opción: SRS.

# CONTROL DE TRACCIÓN INTELIGENTE

El control de tracción inteligente STC (Smart Traction Control), estándar en la 4Front 2, ofrece una estabilidad inigualable. Su silla de ruedas eléctrica seguirá dirigiéndose hacia la dirección deseada, independientemente de las influencias externas como la superficie o las condiciones climáticas, y sin hacer ningún ajuste.



# INTERÂCTIVE ÂSSIST

Reduzca las visitas de mantenimiento con nuestra reciente e innovadora aplicación.

- PANTALLA RETROVISORA
- SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL
- ME IORAS DE EFICIENCIA
- OCULIOIÓN DE DECELEMAN
- GESTIÓN DE LA BATERÍA
- HISTORIAL DE DIAGNÓSTICOS
- HISTORIAL DE DIAGNOSTICOS
- 4.00E00 DEMOTO

Q-Logic ofrece ahora Interactive Assist. una aplicación que ofrece una conexión directa en tiempo real desde la electrónica de la silla eléctrica hasta la estación de programación del proveedor. La conexión proporciona al personal técnico un sistema información completo е diagnóstica junto con algunas herramientas, como la imagen espejo en tiempo real de la pantalla de la silla eléctrica.





HISTORIAL DEL REGISTRO DE CAMBIOS

GUARDADO DE ARCHIVOS XPA

HISTORIAL DE USO DEL MOTOR

MENSAJERÍA


PROGRAMACIÓN DEL MENI

ACCESO A LAS FUNCIONES BLUETOOTH

ACCESO A LA PROGRAMACIÓN DE

DISTRIBUIDOR A DISTRIBUIDOR



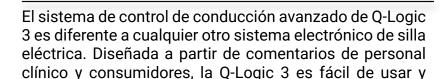

altamente personalizable.

#### **CARACTERÍSTICAS**

- Programación de Bluetooth inalámbrico con dispositivos Windows
- Acceso por Bluetooth a las funciones del ordenador, la tableta y el teléfono
- Botón programable iAccess y opciones para alternar para un acceso al asiento personalizado
- Modo clínico:
  - Ajuste de múltiples dispositivos de entrada
  - Asignación automática de modos de conducción

#### PANTALLA AUMENTADA

Q-LOGIC 3

La pantalla aumentada EX opcional de Q-Logic 3 funciona como una pantalla independiente que se utiliza con controles de conducción especiales para mostrar los datos del sistema. Gracias a los controles medioambientales integrados de la pantalla aumentada, Q-Logic 3

puede gestionar una amplia variedad de aparatos que utilicen controles remotos infrarrojos, como televisiones, y funcionar como un emulador de ratón de ordenador mediante

Bluetooth.





UNA PROGRAMACIÓN FLUIDA Y CONECTIVIDAD FUTURA

#### i - D R I V E <sup>®</sup>

CONJUNTO DE FUNCIONES PARA LA CABEZA DE NIVEL SUPERIOR STEALTH

..... LOS PUERTOS INTELIGENTES

DETECTAN AUTOMÁTICAMENTE LA CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO A i-DRIVE

CONTROL RESPIRATORIO
PROPORCIONAL EN ÁREAS
CERCANAS

CAPACIDAD DE CONTROLAR
TODOS LOS INTERRUPTORES
SIN PRESIÓN DESDE UNA CAJA

OFRECE UN CONTROL TOTAL DE
DEL PUNTERO DEL RATÓN IGUAL
QUE UNO DE PC FÍSICO



### STEALTH PRODUCTS



#### i-DRIVE

El sistema de control de i-Drive permite un máximo de seis dispositivos de entrada. El sistema incluye un software que puede mostrar en tiempo real datos diagnósticos, como la dirección deseada del movimiento, para ayudar a establecer y verificar la configuración.







Sip-n-Puff


Mandos

Bandejas

# PRODUCTOS DE POSICIONAMIENTO DE STEALTH

Los productos de posicionamiento de Stealth son el resultado de muchos años de experiencia de Stealth en asiento y posicionamiento clínicos, con especial atención al mínimo detalle de tamaño, funciones y beneficios clínicos.



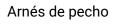



Correa para el pecho



Cinturón pélvico



#### SISTEMAS DE SOPORTE PARA LA CABEZA



Serie Adjustable Comfort Plus



Serie All Positioning



Serie Comfort Plus



Serie Tri Comfort Plus



#### SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO DE LA CABEZA



Serie i2i (sistema de torso superior)



Serie Stealth Ultra

SERIE i2i

CON SOPORTE PARA EL MENTÓN



### STEALTH PRODUCTS

#### SOLUCIONES PARA LA CABEZA

Cuando Stealth Products empezó a comercializarse en 1999, su único producto era un sistema sofisticado de posicionamiento de cabeza adelantado a su tiempo: el Ultra QCR. En el ámbito de la rehabilitación compleja, cada individuo presenta sus propios retos únicos en cuanto a soporte y posicionamiento debido al amplio número de diagnósticos y lesiones. Con el paso del tiempo, Stealth Products se ha ampliado y ha añadido a su catálogo productos clave para ayudar a las personas con esta lucha. Gracias a un amplio abanico de productos diseñados para resolver cualquier complejidad de control o posicionamiento, Stealth Products ha conseguido destacar del resto de la competencia como líder en soporte y posicionamiento posterior de la cabeza.

#### SISTEMAS DE SOPORTE PARA LA CABEZA

Los soportes posteriores para la cabeza están diseñados para recoger la cabeza y se utilizan sobre todo como zona de descanso con un soporte lateral nominal. Stealth Products ofrece una amplia variedad de soportes posteriores para la cabeza a un precio asequible.

#### SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO DE LA CABEZA

El posicionamiento de la cabeza, el cuello y los hombros puede ser uno de los retos más difíciles a los que nos enfrentamos. Stealth Products ofrece una serie de productos para responder a estas necesidades más difíciles. Gracias a nuestra tecnología intuitiva y un diseño elegante, puede tener por seguro que podrá conseguir la posición más específica.



#### **RESPALDOS**







Contorno profundo



Contorno extraprofundo



Pro Activo Estándar



Pro Activo Extra Deep



Pro Activo Flex Tires

#### **COJINES PARA EL ASIENTO**



<sup>\*</sup> No disponible con la tecnología Coolcore®



### STEALTH PRODUCTS

#### **COJINES PARA EL ASIENTO**

Los cojines de Stealth Products presentan la tecnología patentada Coolcore, un material elástico de 4 vías sin sustancias químicas que ofrece propiedades de transpiración, transporte y evaporación de la humedad.

#### CARACTERÍSTICAS DE LOS COJINES



Tecnología exclusiva de CoolCore



Tirador de cremallera circular y de goma para tirar fácilmente

#### RESPALDOS

El ADI Q-Back, disponible en 3 sistemas de asiento TRU-Balance, se ofrece con tres configuraciones: contorno activo, contorno profundo y contorno extraprofundo.

Diseñado ergonómicamente para corregir la postura, nuestro sistema de asiento alivia la tensión en la zona lumbar en días largos y activos en una silla al distribuir de una forma más equitativa las fuerzas a través de la base pélvica de soporte, y un buen soporte, como es lógico, se traduce en menos dolor.



### INTERNACIONAL



PRIDE MOBILITY PRODUCTS

Quantum Rehab es una marca de Pride Mobility Products, el diseñador y fabricante líder a nivel mundial de productos de movilidad, que incluyen las sillas eléctricas Jazzy, las scooters para viajar Go Go, las scooters Pride Mobility y la elevación eléctrica reclinable Pride. Pride tiene el compromiso de proporcionar productos diseñados, fabricados y probados de forma experta que incorporan funciones con tecnología innovadora y que permiten a los consumidores alcanzar la mejor calidad de vida y sus objetivos de movilidad.

#### SCOOTERS DE PRIDE MOBILITY

Cuando hablamos de soluciones de movilidad, las scooters eléctricas de Pride son de una categoría sin igual. Con distintos modelos que atienden a necesidades específicas de los usuarios, hay una scooter para cada bolsillo y aplicación. Desde compacta hasta tamaño completo, tenga por seguro que encontrará la scooter motorizada de Pride ideal.

#### GO GO

Como líder mundial en scooters, Pride revoluciona la industria con la scooter para viajar Go Go, un producto de movilidad ultracompacto y ligero que se desmonta fácilmente para que el transporte sea incluso más sencillo y los consumidores puedan disfrutar de cualquier viaje.

#### SILLAS ELÉCTRICAS JAZZY

La silla de ruedas eléctrica Jazzy ofrece un amplio rango de soluciones de movilidad que se han diseñado para el mundo real. Desde sillas de ruedas eléctricas de fácil transporte hasta modelos robustos con suspensión ATX Active-Trac para un mayor rendimiento sobre distintos terrenos, hay una silla eléctrica Jazzy para cada necesidad.



## RESUMEN DE PRODUCTOS

	Sparky	Aspen	Partner	Q4	Q6 Edge 3	Q6 Edge 3 Stretto	Q6 Edge HD	4Front 2	Q1450
CAPACIDAD DE PESO	56,7 kg	136 kg	136 kg	136 kg	136 kg	136 kg	204,5 kg	136 kg	272 kg
RADIO DE GIRO	743 mm	641 mm	654 mm	508 mm	521 mm	622 mm	502 mm	658 mm	673 mm
LONGITUD 1,4	959 mm	1070 mm	1100 mm	902 mm	820 mm	825 mm	904 mm	1014 mm	1149 mm
ANCHURA 1,4	610 mm	580 mm	635 mm	610 mm	622 mm	552 mm	667 mm	616 mm	743 mm
BATERÍAS	2x 40 Ah	2x 62 Ah	2x 62 o 75 Ah	2x 62 o 75 Ah	2x 62 Ah	2x 40 o 62 Ah	2x 62 o 75 Ah	2x 62 o 75 Ah	2x 62 o 75 Ah
RUEDAS MOTRICES	12"	14"	14"	14"	14"	14"	14"	14"	14"
RUEDAS CASTER	8"	8" o 9"	9"	6"	6"	Delanteras: 5" Traseras: 6"	6"	9"	9"
VELOCIDAD MÁX.	10 km/h	10 km/h	10 km/h	10 km/h	10 km/h	10 km/h	7,6 km/h	10,6 km/h	7,9 km/h
ANCHURA DEL ASIENTO	254 - 457 mm	381 - 533 mm	356 - 508 mm	381 - 533 mm	305 - 610 mm	305 - 610 mm	508 - 813 mm	305 - 610 mm	508 - 813 mm
PROFUNDIDAD DEL ASIENTO	254 - 356 mm	381 - 508 mm	356 - 508 mm	381 - 508 mm	305 - 610 mm	305 - 610 mm	406 - 610 mm	356 - 610 mm	381 - 711 mm
DISTANCIA DE LA BASE HASTA EL SUELO	95 mm	76 mm	76 mm	63 mm	69 mm	73 mm	64 mm	48 mm	38 mm
¿POSIBILIDAD DE ILEVEL?	-	-	-	-	Sí	Sí	Sí	-	-

Las dimensiones indicadas son solo para la base de alimentación
 Debido a tolerancias de fabricación y la mejora continua del producto, esta especificación puede estar sujeta a una variación del (+/-) 3 %

Esta especificación puede cambiar sin previo aviso

Sin reposapiés

## SERVICIO Y ASISTENCIA



¿Tiene alguna pregunta? No dude en ponerse en contacto con nosotros. Puede llamarnos o enviarnos un correo electrónico.

#### **ATENCIÓN AL CLIENTE**

acliente@pridemobility.es +34 911 26 49 83 (Ext. 1)

#### **SERVICIO TÉCNICO**

sat@pridemobility.es +34 911 26 49 83 (Ext. 2)

- La velocidad varía según el peso, el tipo de terreno, la carga de la batería, el estado de la batería y la presión de las ruedas
   Debido a tolerancias de fabricación y la mejora continua del producto, esta especificación puede estar sujeta a una variación del (+/-) 3 %
   Las dimensiones indicadas son solo para la base de alimentación. Las medidas generales varían según la selección de asiento y accesorios
   Sin reposapiés



